

FEUILLET TECHNIQUE

GGT

Plaques GGT VITROS Chemistry Products

Gamma-glutamyltransférase

REF 825 7289

Application

Pour usage *in vitro* uniquement.

Les plaques GGT VITROS Chemistry Products mesurent la concentration de gamma-glutamyltransférase (GGT) contenue dans le sérum et le plasma sur les systèmes de chimie clinique VITROS 250/350/950/5,1 FS, 4600 et VITROS 5600.

Résumé et principe du dosage

La γ -glutamyltransférase joue un rôle essentiel dans le métabolisme du glutathion et dans la résorption des acides aminés du filtrat glomérulaire, ainsi que dans l'absorption des acides aminés de la lumière intestinale. La GGT est présente principalement dans le foie, le pancréas, le rein et, en de moindres concentrations, dans la plupart des autres organes. La GGT sérique constitue un indicateur sensible des affections hépatobiliaires notamment dans le diagnostic d'un ictère par obstruction, d'une hépatite alcoolique chronique, pour le suivi des personnes souffrant d'alcoolisme chronique suivant un traitement ainsi que pour la détection d'une hépatotoxicité. La GGT répond davantage à l'obstruction biliaire que l'AST, l'ALT ou l'ALP. La concentration GGT augmente également dans les cas d'hépatome, de carcinome pancréatique et de carcinome avec métastases hépatiques ¹.

Principe de la méthode

La méthode de dosage sur plaque GGT VITROS est réalisée à l'aide des plaques GGT VITROS et du jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3 sur les systèmes de chimie clinique VITROS 250/350/950/5,1 FS et 4600, et sur le système intégré VITROS 5600.

La plaque GGT VITROS est constituée d'un support en polyester recouvert d'un film analytique multicouche.


Une goutte d'échantillon patient est déposée sur la plaque, puis répartie uniformément par la couche d'étalement dans les couches sous-jacentes. La GGT catalyse le transfert de la fraction γ -glutamyl de la L- γ -glutamyl-*p*-nitroanilide sur la glycylglycine en produisant simultanément de la *p*-nitroaniline. La vitesse de modification de la densité de réflexion est mesurée puis utilisée dans le calcul de l'activité enzymatique de la GGT.

Type de test et conditions d'exécution

Type de test	Système VITROS	Durée approximative d'incubation	Température	Longueur d'onde	Volume de la goutte d'échantillon
Dosage cinétique en points multiples	5600, 4600, 5,1 FS, 950, 250/350	5 minutes	37 °C	400 nm	11 μ L

Les produits et systèmes ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.

Schéma de la réaction

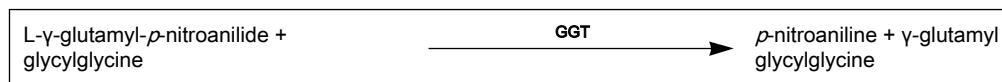

Avertissements et précautions

Pour usage *in vitro* uniquement.

AVERTISSEMENT : prendre les précautions d'usage lors de la manipulation de produits et d'échantillons d'origine humaine. Étant donné qu'aucune méthode de dépistage ne peut totalement garantir l'absence d'agents infectieux, considérer tous les échantillons cliniques, tous les matériaux de contrôle et de calibrage comme étant potentiellement infectieux. Manipuler les échantillons, les déchets solides et liquides, ainsi que les composants des dosages conformément à la législation

locale en vigueur et à la directive M29² du CLSI ou autres directives officielles concernant le risque biologique.

Pour prendre connaissance des avertissements et précautions d'emploi concernant les échantillons de calibrage, les matériaux de contrôle et autres composants, consulter le feuillet technique du produit VITROS correspondant ou la documentation produit du fabricant concerné.

Réactifs


Composition de la plaque

Composants actifs par cm²

Glycylglycine 0,2 mg et L-γ-glutamyl-*p*-nitroanilide 16 µg.

Autres composants

Microbilles de polymère, liants et tensioactifs.

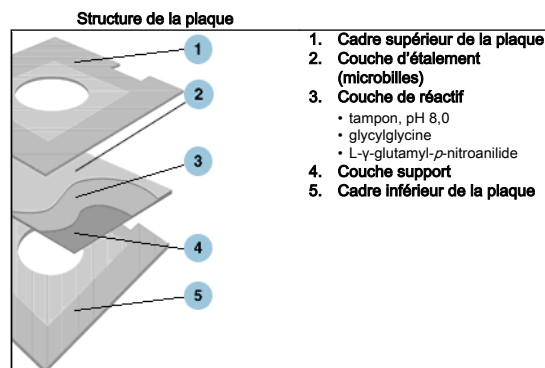

Manipulation des réactifs

Attention : ne pas utiliser les cartouches de plaques dont l'emballage est endommagé ou n'est pas hermétiquement fermé.

- Inspecter soigneusement l'emballage pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Si un instrument pointu est utilisé pour ouvrir l'emballage externe, veiller à ne pas endommager l'emballage individuel du produit.

Préparation du réactif

IMPORTANT : la cartouche de plaques doit revenir à température ambiante, entre 18–28 °C, avant d'être sortie de son emballage et chargée dans la réserve de plaques.

1. Retirer les cartouches de leur lieu de conservation.
2. Laisser la cartouche, dans son emballage, revenir à température ambiante pendant 30 minutes après retrait du réfrigérateur ou 60 minutes après retrait du congélateur.
3. Retirer la cartouche de son emballage et la charger dans la réserve de plaques.

Remarque : charger les cartouches dans les 24 heures qui suivent le moment où elles ont atteint la température ambiante, soit 18–28 °C.

Conservation et stabilité des réactifs

Les plaques GGT VITROS sont stables jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage, dans les conditions de conservation et de manipulation requises. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Réactif	Conditions de conservation		Stabilité
Non ouverts	Réfrigérés	2–8 °C	Jusqu'à la date de péremption
	Congelés	≤ -18 °C	Jusqu'à la date de péremption
Ouverts	À bord du système	Système en service (ON)	≤ 4 semaines
	À bord du système	Système hors-service (OFF)	≤ 2 heures

Vérifier les performances à l'aide des matériaux de contrôle qualité :

- Si le système est arrêté pendant plus de 2 heures.
- Après avoir chargé des cartouches retirées de la réserve de plaques et mises de côté en vue d'une utilisation ultérieure.

Prélèvement, préparation et conservation des échantillons

Échantillons recommandés

- Sérum
- Plasma :
 - EDTA
 - Héparine

IMPORTANT : *il a été constaté que certains dispositifs de prélèvement d'échantillons biologiques affectaient d'autres analytes et dosages³. En raison de la diversité des dispositifs de prélèvement d'échantillon disponibles, Ortho-Clinical Diagnostics n'est pas en mesure de se prononcer de manière définitive sur la performance de ces produits avec ces dispositifs. S'assurer que les dispositifs de prélèvement utilisés sont compatibles avec ce dosage.*

Sérum et plasma

Prélèvement et préparation des échantillons

Prélever les échantillons selon les techniques de laboratoire classiques^{4, 5}.

Remarque : pour plus de détails sur les volumes de remplissage minimum requis, se reporter au mode d'emploi du système.

Préparation du patient

Le patient ne nécessite aucune préparation particulière.

Précautions particulières

- Pour connaître les conséquences d'une concentration élevée de bilirubine sur les résultats du dosage, se reporter au paragraphe « Limites de la méthode ».
- Centrifuger les échantillons et séparer le sérum ou le plasma du matériel cellulaire dans les 4 heures suivant leur prélèvement⁶.

Manipulation et conservation des échantillons

- Manipuler et conserver les échantillons dans des récipients fermés afin d'éviter tout risque de contamination ou d'évaporation.
- Mélanger les échantillons par inversion douce et les laisser revenir à la température ambiante, soit 18–28 °C, avant analyse.

Conservation et stabilité des échantillons⁶

Conservation	Température	Stabilité
Température ambiante	18–28 °C	≤ 7 jours
Réfrigérés	2–8 °C	≤ 7 jours
Congelés	≤ -18 °C	≤ 2 mois

Procédure de dosage

Matériel fourni

Plaques GGT VITROS Chemistry Products

Matériel nécessaire, mais non fourni

- Jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3
- Matériaux de contrôle qualité tels que les échantillons de contrôle VITROS Chemistry Products Performance Verifier I et II
- Solution VITROS Chemistry Products 7% BSA
- Cartouche de diluant VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2 (BSA/Solution saline) (pour le mode dilution à bord du système)

Mode opératoire

- Vérifier les réserves de réactifs au moins une fois par jour afin de s'assurer que les quantités disponibles sont suffisantes pour réaliser la charge de travail programmée.
- Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du système.

IMPORTANT : ramener tous les liquides et tous les échantillons à la température ambiante, soit 18–28 °C, avant analyse.

Dilution des échantillons

Sérum et plasma

Si l'activité de la gamma glutamyltransférase dépasse la gamme de mesures (linéarité) du système :

Dilution manuelle d'échantillon

1. Diluer l'échantillon avec la solution VITROS 7% BSA.
2. Procéder à une nouvelle analyse de l'échantillon.
3. Multiplier les résultats par le facteur de dilution pour obtenir une estimation de l'activité de la gamma glutamyltransférase de l'échantillon avant dilution.

Dilution des échantillons à bord du système (systèmes intégré VITROS, VITROS 5,1 FS/4600 et VITROS 250/350 uniquement)

Pour de plus amples informations concernant la procédure de dilution à bord du système, se reporter au mode d'emploi du système. Pour les systèmes intégrés VITROS et VITROS 5,1 FS/4600, utiliser la cartouche de diluant VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2 pour la dilution.

Calibrage

Étalons requis

Jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3

Préparation, manipulation et conservation des étalons

Se reporter au feuillet technique du jeu d'échantillons de calibrage VITROS Calibrator Kit 3.

Procédure d'étalonnage

Se reporter au mode d'emploi du système.

Quand étalonner

Calibrer :

- quand le numéro de lot des plaques change ;
- après une opération de maintenance, telle que le remplacement d'une pièce importante du système ;
- lorsque la législation en vigueur dans le pays l'impose.

Aux États-Unis, par exemple, la réglementation CLIA impose un calibrage ou une vérification du calibrage tous les six mois au minimum.

Il peut également être nécessaire de calibrer le dosage VITROS GGT :

- si les résultats du contrôle de qualité sont régulièrement en dehors des limites acceptables ;
- après certaines interventions techniques.

Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du système.

Calculs

Une vitesse de variation de la réflectance est calculée d'après des mesures séquentielles de réflectance de la plaque à 400 nm sur la période d'incubation définie. Cette vitesse est utilisée par le modèle de calibrage de dosage enzymatique cinétique en points multiples intégré au logiciel. Une fois qu'un calibrage a été effectué sur chaque lot de plaques, l'activité de la gamma-glutamyltransférase dans les échantillons à tester peut être calculée à partir de la vitesse de variation de la réflectance mesurée pour chaque plaque à tester.

Validité d'un calibrage

Les paramètres de calibrage sont automatiquement évalués par le système par rapport à une série de paramètres de qualité, qui sont présentés en détail sur l'écran Coefficients et Limites des systèmes VITROS 250/350/950 (pour les systèmes intégrés VITROS et VITROS 5,1 FS/4600, voir l'écran Vérification des données de dosage). La non conformité aux paramètres de qualité prédéfinis entraîne l'échec du calibrage. Le rapport de calibrage doit être utilisé conjointement avec les résultats de contrôle de qualité pour établir la validité du calibrage.

Gamme de mesures (linéarité)

Unités conventionnelles et SI (U/L)	Autres unités (μ kat/L)
10–1400	0,17–23,38

Pour les échantillons hors gamme, se reporter au paragraphe « Dilution des échantillons ».

Traçabilité de l'étalonnage

Les valeurs attribuées au jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3 pour la gamma-glutamyltransférase sont dérivées de la méthode de dosage de la gamma-glutamyltransférase recommandée par l'International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)⁷, adaptée à un système centrifuge à une température de 37 °C.

Contrôle de qualité

Choix du matériau de contrôle de qualité

IMPORTANT : *il est conseillé d'utiliser les échantillons de contrôle VITROS Performance Verifier sur les systèmes de chimie clinique et systèmes intégrés VITROS. Avant d'utiliser d'autres échantillons de contrôle disponibles sur le marché, vérifier leur compatibilité avec ce dosage.*

- Les échantillons de contrôle autres que les VITROS Performance Verifiers peuvent donner des résultats différents comparés à ceux obtenus par d'autres méthodes de dosage de la gamma-glutamyltransférase si :
 - ils ne proviennent pas d'une matrice humaine véritable ;
 - ils contiennent de fortes concentrations de conservateurs, stabilisants ou autres additifs non physiologiques.
- L'activité enzymatique peut également varier suivant l'origine de l'enzyme, la température du diluant et le temps d'activation durant la reconstitution.
- Ne pas utiliser de matériaux de contrôle stabilisés avec de l'éthylène glycol.

Recommandations sur les procédures de contrôle de qualité

- La concentration de l'échantillon de contrôle doit être choisie en fonction de la gamme clinique du test pour lequel il est employé.
- Analyser les matériaux de contrôle de qualité de la même manière que des échantillons de patients, avant ou durant le traitement de ces derniers.
- Pour vérifier les performances du système, analyser les matériaux de contrôle :
 - après le calibrage ;
 - conformément à la législation locale en vigueur ou au moins une fois par jour le jour où le dosage est réalisé ;
 - après certaines interventions de maintenance. Se reporter au mode d'emploi du système.
- Si les résultats des contrôles sont en dehors de la gamme acceptable, en rechercher la cause avant de décider de générer les rapports de résultats patients.
- Pour prendre connaissance des recommandations générales en matière de contrôle de qualité, consulter le document *Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition*⁸ ou d'autres directives officielles.
- Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du système.

Préparation, manipulation et conservation des matériaux de contrôle de qualité

Se reporter au feuillet technique des matériaux de contrôle VITROS Chemistry Products Performance Verifier I et II ou à toute autre documentation fournie par le fabricant du produit.

Résultats

Unités employées et de conversion

Les systèmes de chimie clinique et le système intégré VITROS peuvent être programmés de manière à présenter les résultats GGT en unités conventionnelles ou en unités SI.

Unités conventionnelles et SI	Autres unités
U/L	μkat/L (U/L x 0,0167)

Limites de la méthode

Interférences connues

La méthode de dosage sur plaque GGT VITROS a été testée pour détecter la présence éventuelle de substances interférentes conformément au protocole EP7¹¹ du NCCLS. Les substances suivantes, testées aux concentrations indiquées, ont provoqué le biais mentionné dans le tableau ci-dessous.

Se reporter au paragraphe «Spécificité» pour consulter la liste des composés testés qui n'ont causé aucune interférence.

GGT

Gamma-glutamyltransférase

FEUILLET TECHNIQUE

Valeurs attendues

Substances interférentes*	Substances interférentes Concentration	Activité de la gamma-glutamyltransférase		Biais	
		Unités conv. et Autres unités SI (U/L)	(μ kat/L)	Unités conv. et Autres unités SI (U/L)	(μ kat/L)
Bilirubine	32 mg/dL (547 μ mol/L)	140	2,3	+23	+0,4
	40 mg/dL (684 μ mol/L)	1100	18,4	-460	-7,7
Hémoglobine	600 mg/dL (6 g/L)	73	1,2	-13	-0,2

*D'autres substances peuvent induire une interférence. Ces résultats sont indiqués à titre de référence ; cependant, les résultats obtenus sur un système donné peuvent s'en écarter quelque peu en raison des variations pouvant exister d'une méthode de dosage à une autre. Le degré d'interférence à des concentrations autres que celles indiquées peut échapper à toute prévision.

Autres limites

Certains médicaments et états cliniques peuvent modifier l'activité de la gamma-glutamyltransférase *in vivo*. Pour plus d'informations, se reporter à l'un des résumés publiés ^{12, 13}.

Valeurs attendues

Valeurs de référence

Ces valeurs de référence correspondent aux 95% centraux des résultats d'une étude externe portant sur 493 adultes (277 femmes et 216 hommes) volontaires apparemment sains ⁹. L'étude a été réalisée conformément au protocole C28 ¹⁰ du NCCLS.

	Unités conventionnelles et SI (U/L)	Autres unités (μ kat/L)
Adultes	12–58	0,20–0,97
Femmes	12–43	0,20–0,72
Hommes	15–73	0,25–1,22

Chaque laboratoire est tenu de vérifier la validité de ces valeurs de référence pour ses propres patients.


Performances

Comparaison des méthodes

Les courbes et le tableau montrent les résultats de la comparaison entre les échantillons sériques analysés sur le système de chimie clinique VITROS 750 et ceux analysés à l'aide de la méthode comparative de dosage du γ -glutamyl-carboxy-nitroanilide, modifiée par Evans ¹⁴. Les analyses ont suivi le protocole EP9 ¹⁵ du NCCLS.

Le tableau présente également les résultats de la comparaison entre les échantillons sériques analysés sur les systèmes VITROS 250 et 950 et ceux analysés sur le système VITROS 750, ainsi qu'entre le système VITROS 5,1 FS et le système VITROS 950.

Le tableau indique aussi les résultats de la comparaison entre les échantillons sériques et plasmatiques analysés sur le système intégré VITROS 5600 et ceux analysés sur le système de chimie clinique VITROS 5,1 FS. Le dosage a été effectué conformément au protocole EP9 ¹⁶ du NCCLS.

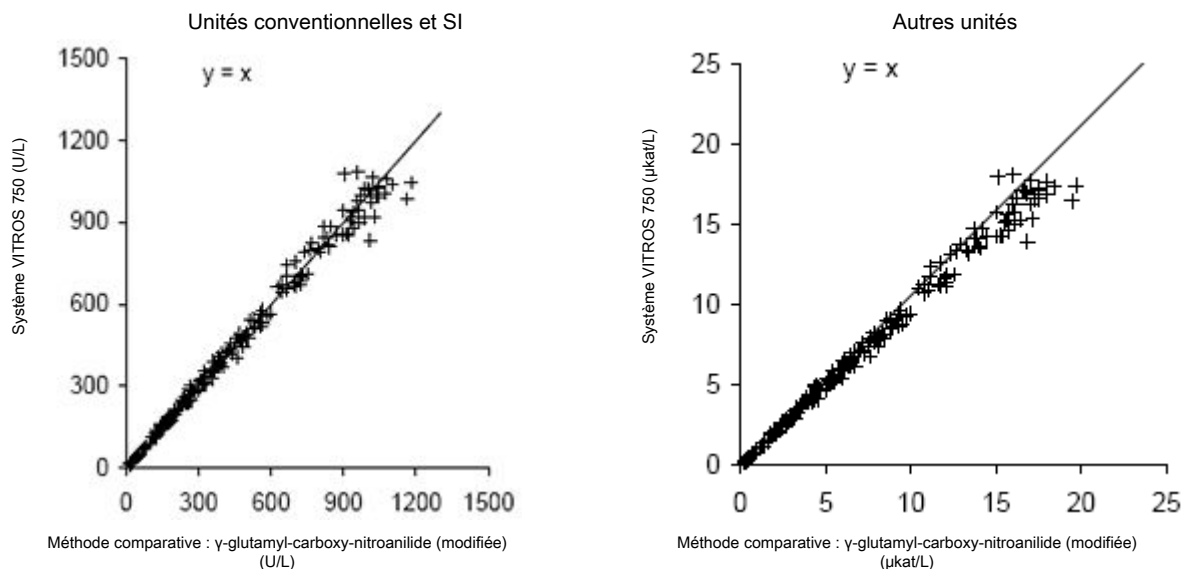

	n	Pente	Coefficient de corrélation	Unités conventionnelles et SI (U/L)			Autres unités (µkat/L)		
				Intervalle de concentration de l'échantillon	Ordonnée à l'origine	Sy.x	Intervalle de concentration de l'échantillon	Ordonnée à l'origine	Sy.x
Système 750 / Méthode comparative	234	0,97	0,995	12–1179	+7,58	32,32	0,2–19,7	+0,13	0,54
Système 250 / Système 750	79	1,00	1,000	33–1391	-0,08	13,77	0,6–23,2	0,00	0,23
Système 950 / Système 750	113	0,99	1,000	13–1391	-0,86	6,75	0,2–23,2	-0,01	0,11
Système 5,1 FS[†] / Système 950	129	1,00	1,000	16–1320	+0,54	5,37	0,3–22,0	+0,01	0,09
Système 5600 / Système 5,1 FS[†]	105	1,03	0,998	14–1323	-1,45	17,27	0,2–22,1	-0,02	0,29

[†] Les algorithmes logiciels et matériels de traitement analytique du système de chimie clinique VITROS 4600 sont conçus avec les mêmes spécifications que ceux appliqués au système de chimie clinique VITROS 5,1 FS. On a démontré que la performance des dosages sur le système VITROS 4600 est comparable à celle sur le système VITROS 5,1 FS. Toutes les caractéristiques de performance du système VITROS 5,1 FS sont par conséquent applicables au système VITROS 4600.

Précision

La précision a été évaluée à l'aide d'échantillons de contrôle de qualité sur les analyseurs VITROS 250, 750, 950 et 5,1 FS conformément au protocole EP5¹⁷ du NCCLS. La précision a été évaluée à l'aide de matériaux de contrôle de qualité sur le système intégré VITROS 5600 conformément au protocole EP5¹⁸ du NCCLS.

Les données présentées sont représentatives de la performance du dosage et sont données à titre indicatif. Des variables telles que la manipulation et la conservation des échantillons et des réactifs, l'environnement du laboratoire et l'entretien du système peuvent affecter la reproductibilité des résultats.

	Unités conventionnelles et SI (U/L)			Autres unités (µkat/L)			CV % intra-laboratoire **	Nombre d'observ.	Nombre de jours
	Concentration moyenne	ET intra-jour*	ET intra-laboratoire **	Concentration moyenne	ET intra-jour*	ET intra-laboratoire **			
250	78	0,6	0,9	1,3	0,01	0,02	1,2	79	20
	502	5,3	8,2	8,4	0,09	0,14	1,6	78	20
750	21	0,5	0,8	0,3	0,01	0,01	3,9	92	23
	60	0,7	1,3	1,0	0,01	0,02	2,2	92	23
	432	4,0	11,2	7,2	0,07	0,19	2,6	92	23
950	61	0,5	1,0	1,0	0,01	0,02	1,7	92	23
	424	2,9	9,8	7,1	0,05	0,16	2,3	92	23
5,1 FS†	67	0,7	1,2	1,1	0,01	0,02	1,7	88	22
	447	3,9	8,1	7,5	0,07	0,14	1,8	88	22
5600	80	1,2	1,5	1,3	0,02	0,03	1,9	88	22
	445	6,4	7,9	7,4	0,11	0,13	1,8	88	22

* La précision de la journée est déterminée par la réalisation quotidienne de deux tests sur deux à trois doublons.

** La précision du laboratoire est déterminée par la réalisation de tests sur un seul lot de plaques et par un calibrage hebdomadaire.

† Les algorithmes logiciels et matériels de traitement analytique du système de chimie clinique VITROS 4600 sont conçus avec les mêmes spécifications que ceux appliqués au système de chimie clinique VITROS 5,1 FS. On a démontré que la performance des dosages sur le système VITROS 4600 est comparable à celle sur le système VITROS 5,1 FS. Toutes les caractéristiques de performance du système VITROS 5,1 FS sont par conséquent applicables au système VITROS 4600.

Spécificité

Les substances répertoriées dans le tableau ont été testées sur les plaques GGT VITROS conformément au protocole EP7¹¹ du NCCLS. Aucune interférence n'a été observée, avec un biais <12 U/L (<0,20 µkat/L), à la concentration indiquée.

Composé	Concentration		Composé	Concentration	
Acétaminophène	5 mg/dL	331 µmol/L	Vert d'indocyanine	10 mg/dL	129 µmol/L
Acide acétoacétique	30 mg/dL	3 mmol/L	Intralipide	800 mg/dL	8 g/L
L-alanine	5 mg/dL	561 µmol/L	Salicylate	35 mg/dL	3 mmol/L
Acide ascorbique	3 mg/dL	170 µmol/L	Protéines totales	10 g/dL	100 g/L
Éthanol	300 mg/dL	65 mmol/L	Azote uréique	100 mg/dL	36 mmol/L
Glycine	5 mg/dL	666 µmol/L			






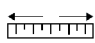
















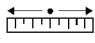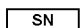







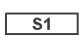

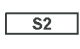Bibliographie

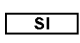1. Tietz NW (ed). *Fundamentals of Clinical Chemistry*. ed. 3. Philadelphia: WB Saunders; 391-392; 1987.
2. CLSI. *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition*. CLSI Document M29-A3 [ISBN 1-56238-567-4]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2005.
3. Calam RR. Specimen Processing Separator Gels: An Update. *J. Clin. Immunoassay*. 11:86–90; 1988.
4. CLSI. *Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition*. NCCLS document H3-A6 [ISBN 1-56238-650-6]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2007.
5. NCCLS. *Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard—Fifth Edition*. NCCLS document H4-A5 [ISBN 1-56238-538-0]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA; 2004.
6. *Clinical Laboratory Handbook for Patient Preparation and Specimen Handling*. Fascicle VI: Chemistry/Clinical Microscopy. Northfield, IL: College of American Pathologists; 1992.
7. Shaw LM, Stromme JH, London JL, Theodorsen L. IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 4. IFCC method for gamma-glutamyltransferase. *J. Clin. Chem. Clin. Biochem*. 21: 633–646; 1983.
8. CLSI. *Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline – Third Edition*. CLSI document C24-A3 [ISBN 1-56238-613-1]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2006.
9. Neels H, Van Boeckel E, Wauters A. Algemeen Ziekenhuis Middelheim, 1998. Data on file.
10. NCCLS. *How to Define and Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline*. NCCLS document C28-A [ISBN 1-56238-269-1]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA; 1995.

11. NCCLS. *Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline*. NCCLS document EP7-A (ISBN 1-56238-480-5). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA; 2002.
12. Young DS. *Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests*. ed. 4. Washington D.C.: AACC Press; 1995.
13. Friedman RB, Young DS. *Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests*. Washington, D.C.: AACC Press; 1990.
14. Evans LB, Kringle RO. γ -Glutamyltransferase: Response Surface Co-optimization of Reaction Conditions with γ -Glutamyl-3-carboxy- 4-nitroanilide as the Substrate. *Clin. Chem.* 27:1036; 1981.
15. NCCLS. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline*. NCCLS Document EP9. Wayne, PA: CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA; 1995.
16. NCCLS. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline—Second Edition*. NCCLS document EP9-A2 [ISBN 1-56238-472-4]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA; 2002.
17. NCCLS. *User Evaluation of Precision Performance with Clinical Chemistry Devices*. NCCLS Document EP5. Wayne, PA: NCCLS; 1992.
18. NCCLS. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition*. NCCLS document EP5-A2 [ISBN 1-56238-542-9]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2004.

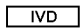Légende des symboles

Les symboles suivants ont pu être utilisés sur l'étiquette de ce produit.

	Ne pas réutiliser		Conserver à une température égale ou inférieure à		Gamme
	À utiliser avant la date de péremption (année-mois-jour)		Conserver à une température égale ou supérieure à		Intervalle des moyennes
	Code ou numéro de lot		Conserver à une température comprise entre		Moyenne
	Numéro de série		Consultez le feuillet technique		Révisé
	Référence catalogue ou code produit		Attention : Le feuillet technique a été actualisé		Remplace
	Précaution		À utiliser avec la réserve de plaques 1		Irritant
	Fabricant		À utiliser avec la réserve de plaques 2		Nocif
	Mandataire dans l'Union européenne		Unités SI		Toxique
	Suffisant pour « n » dosages		Unités conventionnelles		Corrosif
	Pour diagnostic <i>in vitro</i>		Valeur		Inflammable
			Der Grüne Punkt (Point Vert). Le fabricant suit certaines règles de mise au rebut pour les déchets des matériaux d'emballage		Estimation ET du laboratoire

Récapitulatif des révisions

Date de révision	Version	Description des modifications techniques*
2012-02-28	7.0	Légende des symboles: Mis à jour
2010-11-01	6.0	Ajout d'informations pour le système de chimie clinique VITROS 4600
2008-11-05	5.0	<ul style="list-style-type: none"> Ajout d'informations pour le système intégré VITROS 5600 Type de test et conditions d'exécution – Ajout d'énoncé Méthode de comparaison – Ajout d'informations sur les types d'échantillons Bibliographie – Mise à jour Légende des symboles – Mise à jour des données Modifications mineures du texte et du formatage

GGT

Gamma-glutamyltransférase

FEUILLET TECHNIQUE

Récapitulatif des révisions


Date de révision	Version	Description des modifications techniques*
2007-12-17	4.0	<ul style="list-style-type: none"> Interférences connues – mise à jour de la bilirubine Bibliographie – mise à jour de M29, H3, H4, C24, EP7
2004-09-13	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Ajout du système VITROS 5,1 FS Limites de la méthode – ajout de l'hémoglobine ; suppression de la note en bas de page concernant la bilirubine Spécificité – ajout de l'intralipide ; suppression de l'hémoglobine Légende des symboles – mise à jour des données
2003-06-30	2.0	<ul style="list-style-type: none"> Nouvelle organisation et sections conformes à la Directive sur les dispositifs médicaux de diagnostic <i>in vitro</i> (IVD) Prélèvement et préparation des échantillons – suppression de la phrase concernant les échantillons hémolysés Limites de la méthode – mise à jour des valeurs concernant l'activité et le biais dans le tableau des substances interférentes connues Méthode de comparaison – mise à jour de toutes les comparaisons et des courbes Précision – mise à jour des données concernant les systèmes 750 et 950 Spécificité – mise à jour de la concentration en hémoglobine Bibliographie – ajout des références 2, 3, 7, 11, 15, 16
2002AVR19	1.0 – En anglais seulement	Nouveau format, techniquement équivalent à celui de 11/98.

* Les barres verticales dans la marge signalent l'endroit du texte où a été ajouté un amendement technique par rapport à la version précédente du document.

Lors du remplacement de ce feuillet technique, signer et dater ci-dessous, puis archiver conformément à la législation locale en vigueur ou aux directives du laboratoire.

Signature

Document caduc le :

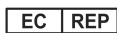

Ortho-Clinical Diagnostics
50-100 Holmers Farm Way
High Wycombe
Buckinghamshire
HP12 4DP
United Kingdom



Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
100 Indigo Creek Drive
Rochester, NY 14626

VITROS est une marque déposée d'Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

© Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2002-2012

Ortho Clinical Diagnostics

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES